

Beauty for You

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

URZĄDZEŃ DO LASEROWEJ
TERAPII SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

Model NY-E039




OPIS PRODUKTU

Urządzenia do laserowej terapii skóry głowy i włosów, powszechnie nazywane "szczotkami laserowymi", to produkty użytku domowego, przeznaczone dla osób chcących poprawić wygląd, zdrowie i gęstość włosów. Urządzenie łączy w sobie funkcję masażu, z możliwością stosowania preparatów stymulujących wzrost włosów dzięki zbiorniczki do dawkowania preparatów, z funkcją stymulacji krążenia, komórek skóry i mieszków włosowych przy pomocy niskoenergetycznego lasera oraz mikroimpulsów elektrycznych, a także funkcją ozonowania skóry głowy i włosów. Wszystkie funkcje powodują zmniejszone wypadanie włosów oraz stymulację i odrost nowych włosów.

DZIAŁANIE

Stymulacja skóry głowy i mieszków włosowych następuje poprzez połączone oddziaływanie wszystkich funkcji. Unikatowe zestawienie powoduje zwiększenie wydolności naczyń włosowatych, które dostarczają do mieszków włosowych i włosów substancje odżywcze, poprawienie krążenia, pobudzenie mieszków włosowych do produkcji nowych włosów oraz zabijanie bakterii występujących na skórze głowy i włosach. Zastosowanie laserów 1M (1M - Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być

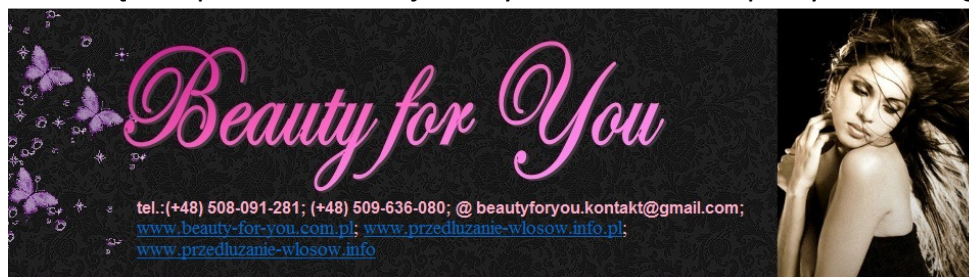

Beauty for You

niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne) gwarantuje bezpieczeństwo w stosowaniu urządzenia w warunkach domowych.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie jest polecane dla osób z następującymi problemami:

- Łysienie łojotokowe
- Łysienie typu męskiego
- Łysienie bliznowaciejące
- Łysienie spowodowane zastosowaniem chemii
- Łysienie poporodowe
- Łysienie menopauzoidalne
- Łysienie spowodowane chorobami skóry głowy
- Pasożyty skóry głowy i włosów
- Niedostateczne krążenie krwi w skórze głowy
- Zablokowane mieszki włosowe
- Niedożywienie korzeni włosów
- Łysienie spowodowane stresem

OPIS URZĄDZEŃ

URZĄDZENIE MASUJĄCE




Dozowniki preparatów
wspomagających wzrost
włosów

Rzędy z końcówkami
stymulującymi skórę głowy w
trakcie masażu

Wlew dozownika

Dioda sygnalizująca działanie

Przełącznik ON/OFF

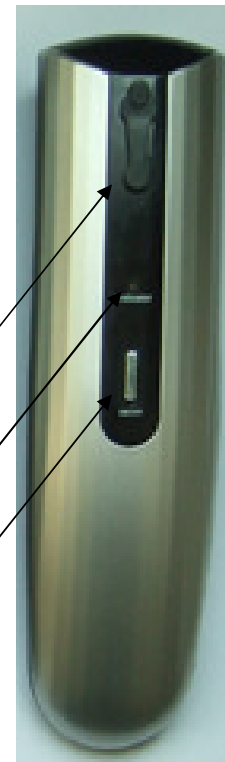

Beauty for You

URZĄDZENIE STYMULUJACO-STERYLIZUJĄCE



SPOSÓB UŻYCIA

1. Wybierz urządzenie.
2. Włącz urządzenie.
3. Masuj głowę korzystając z wybranych funkcji. Dla najlepszych efektów, stosuj oba urządzenia dwa razy dziennie, po 5-15minut, rano i wieczorem.
4. Ładuj urządzenie, kiedy zauważysz słabnące działanie

Pojemnik na substancję stymulującą porost włosów w urządzeniu masującym mieści ok. 10ml. Elektro-stymulatory działają, kiedy miga dioda na urządzeniu stymulująco-sterylizującym.



Beauty for You

UWAGA


Nie stosować w innym celu, niż wskazano w niniejszej instrukcji. Nie podłączać do innych urządzeń elektrycznych. Nie rozmontowywać i nie ingerować w urządzenie. Jeśli urządzenie zacznie działać inaczej niż zwykle i nie jest to wynikiem rozładowania baterii, należy skontaktować się ze sprzedawcą - nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Ciąża, wiek poniżej 12 lat, rozrusznik serca lub inne urządzenia elektryczne w ciele, stosowanie elektroterapii, implanty silikonowe, plastikowe lub metalowe w ciele.

DYSTRYBUCJA

Beauty for You

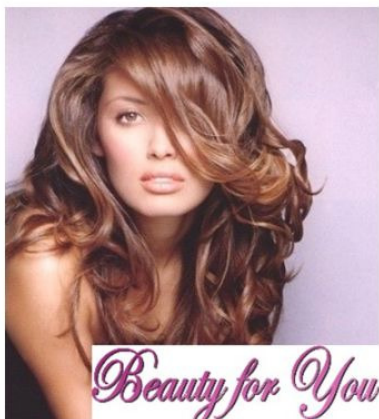


☎ (+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080

@ beautyforyou.kontakt@gmail.com

www.przedluzanie-wlosow.info

www.przedluzanie-wlosow.info.pl

www.beauty-for-you.com.pl

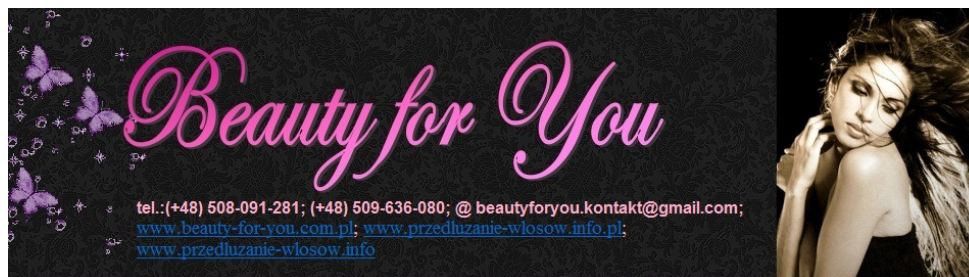

tel.: (+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info